

getaplus-dental

Bedienungsanleitung

getaplus-unicus gum care

getaplus-unicus gum care twin

getaplus-unicus opal

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf der getaplust-unicus, einer Schallzahnbürste der neuesten Generation.

Die getaplust-unicus wird den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Ansprüchen Ihrer Familie gerecht. Bei richtiger und regelmäßiger Anwendung wird sie lange Zeit zur Erhaltung Ihrer Zahngesundheit beitragen.

Sicherheitshinweise

Warnung:

Bitte konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, falls Sie sich vor kurzem einer Operation oder Behandlung im Mundraum unterzogen haben. Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, falls es nach dem Verwenden der Zahnbürste zu anhaltenden oder starken Blutungen kommt.

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander (Ausnahme: Abfallentsorgung).

Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten beaufsichtigt werden, um die richtige Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung:

Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, entsorgen Sie das Ladegerät.

Das Ladegerät vom Wasser fernhalten! Das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Nicht über oder nahe einer gefüllten Badewanne oder einem Waschbecken abstellen.

Das ans Stromnetz angeschlossene Ladegerät vor heißen Oberflächen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die getaplust-unicus Schallzahnbürste entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Sollten Sie als Träger eines Implantats oder Herzschrittmachers jedoch Fragen zur Verwendung des Gerätes haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Schrittmachers oder Implantats in Verbindung.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.

Die Technologie der getaplust-unicus

getaplust-unicus Schallzahnbürste ist eine Aufladbare hydro-aktive Zahnbürste mit Schallwellentechnologie für die 100 % rundum Zahnreinigung.

Druckwellen der Schalltechnologie erzeugen pulsierende Flüssigkeitsströmungen, welche selbst in enge Zahnzwischenräume vordringen. Ablagerungen und Verfärbungen werden rund um den Zahn herum entfernt und lassen die Zähne natürlich weiß und gesund strahlen.

- 1.) Bürstenaufsatz
- 2.) Handstück mit weicher rutschfester Grifffläche und integriertem Zahnputz- und Kieferquadrant-Timer zur einfachen Putzkontrolle
- 3.) Ein- /Ausschalter
- 4.) Funktionswahl mit Memory zum Wechsel des Reinigungsmodus:
 - Sensitiv-Modus:
Oberste LED Lampe leuchtet
Rundum sanfte Reinigung für sensible Zähne und empfindliches Zahnfleisch
 - Intensiv-Modus:
Oberste zwei LED-Lampen leuchten
Rundum gründliche Plaque Entfernung für gesunde Zähne und kräftiges Zahnfleisch
 - Whitening-Modus:
Alle drei LED-Lampen leuchten
Rundum natürliche Zahnaufhellung durch Beseitigung hartnäckiger Verfärbungen
 - Reiseverriegelung:
Lange drücken (4 Sekunden)
Sperrt und entsperrt die Tasten. Verhindert die unbeabsichtigte Inbetriebnahme auf Reisen.
- 5.) Blinkende LED-Anzeige: Signalisiert den gewählten Reinigungsmodus und Ladezustand
- 6.) Ladegerät mit automatischer Spannungsanpassung 100-240 V, wieder aufladbarem Li-ion-Akku, 3 Satelliten für Ersatzbürstenköpfe und 1 Meter Kabel

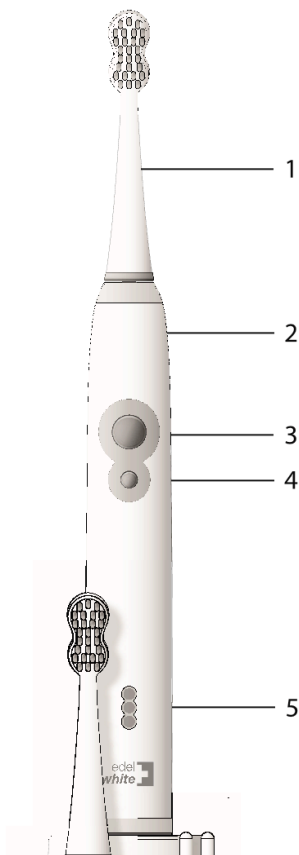

Inbetriebnahme

Den Bürstenaufsatz mit den Borsten zur Vorderseite des Handstückes ausgerichtet fest drücken bis er einrastet. Stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in die Steckdose und stellen Sie das Handstück in das Ladegerät. Die Akkuladestandanzeige blinkt während ca. 10 Sekunden und zeigt den Ladestatus an. Danach schalten alle LED-Lampen aus.

Die getaplus-unicus Schallzahnbürste wird geladen



Akkustandanzeige

Die Aufladedauer beträgt ca. 12 Stunden. Laden Sie die getaplus-unicus Schallzahnbürste vor dem Erstgebrauch komplett auf.

Die LED-Akkustandanzeige blinkt jeweils nach Entnahme von oder beim Platzieren des Gerätes auf die Ladestation, oder nach dem Ausschalten während 10 Sekunden auf und erlischt danach.

Drei blinkende LED-Lampen weisen auf einen geladenen Akku hin. Mit nur einer leuchtenden LED-Lampe beträgt der Akku-Ladestand weniger als 25 %.

Bei Nichtgebrauch empfiehlt es sich die Zahnbürste auf dem Ladegerät zu lassen, damit der Akku geladen bleibt.

Anwendung der getaplus-unicus Schallzahnbürste

Bürstenkopf anfeuchten und Zahnpasta auftragen. Die Bürste in den Mund nehmen und leicht schräg aufsetzen, so dass die Bürste je zur Hälfte auf dem Zahnfleisch und den Zähnen locker aufliegt.

Die Zahnbürste erinnert sich an die zuletzt gewählte Reinigungsfunktion und startet beim Drücken der Einschalttaste automatisch in diesem Modus (Memory). Über den Knopf Funktionsauswahl kann der Reinigungsmodus durch wiederholtes Drücken gewechselt werden.

Sensitiv-Modus: Oberste LED-Lampe leuchtet

Intensiv-Modus: Obersten zwei LED-Lampen leuchten


Whitening-Modus: Alle drei LED-Lampen leuchten



Die Zahnbürste in druckfreien Auf- und Abwärtsbewegungen von Zahn zu Zahn führen. Verbleiben Sie 2-3 Sekunden auf dem Zahn bevor Sie zum nächsten wechseln. Achten Sie darauf, dass die längeren Borsten gut in die Zahnzwischenräume eindringen können. Führen Sie die Zahnbürste für jeden der vier Kieferquadranten zuerst an der Innenseite der Zahnreihe, danach auf der Kaufläche und zum Schluss an der Außenseite entlang.

Nach 30 Sekunden wird jeweils der Wechsel des Kieferquadranten durch eine kurze Schwingunterbrechung signalisiert. Wiederholen Sie den Reinigungsablauf für jeden Quadranten.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Zahnbürste aus. Sie können nach Bedarf durch ein erneutes Einschalten der Zahnbürste das Putzen fortführen.

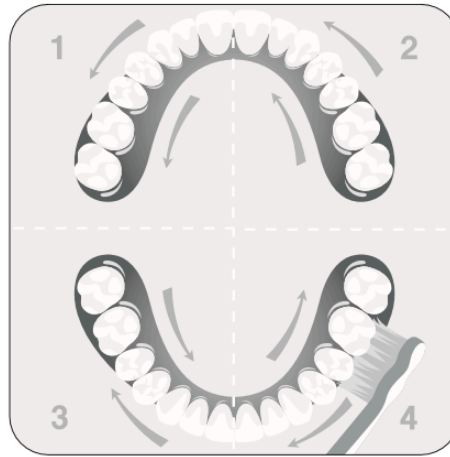

Wichtig:

Üben Sie keinen Druck auf die Zahnbürste aus. Leichter Oberflächenkontakt entlang der Zahnreihen führt zu wesentlich besseren Reinigungsergebnissen und trägt zur Gesunderhaltung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches bei.

Auch Füllungen, Implantate, Kronen, Veneers und Zahnspangen können sicher und zuverlässig mit der getapplus-unicus Schallzahnbürste gereinigt werden.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen den Bürstenkopf alle 3 Monate auszuwechseln.

Besonders das Reinigen von Zahnspangen erhöht den Verschleiß des Bürstenkopfes und beschleunigt den regelmäßigen Wechsel.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt, Ihre Dental-Hygienikerin oder Prophylaxe-Assistentin nach jeder Behandlung ob und wie Sie die Schallzahnbürste verwenden sollen. Diese Dental-Profis sind stets Ihre kompetenten Ansprechpartner bei weiterführenden Fragen.

Reinigungsfunktionen

Die getapplus-unicus Schallzahnbürste wurde für verschiedene Anwendungen entwickelt. Je nach Reinigungsbedürfnis lässt sich die Reinigungsfunktion ändern.

Wahl des Reinigungsmodus und Memory-Funktion

Die Reinigungsfunktionen werden durch wiederholtes Drücken der Funktionsauswahl-Taste gewählt. getapplus-unicus Schallzahnbürste erinnert sich beim Anstellen des Gerätes an den zuletzt gewählten Modus, so dass dieser nicht stets von neuem eingestellt werden muss (Memory-Funktion).

Sensitiv-Modus

Bei gewähltem Sensitiv-Modus leuchtet die oberste LED-Lampe.

Schallwellen mit 45'000 Bewegungen pro Minute lassen die Borstenspitzen sanft schwingen und selbst in kleinste Zahnnischen vordringen. Diese äußerst sanfte effiziente Art der Reinigung schont Zahnschmelz, mögliche freiliegende Zahnhäse und das Zahnfleisch. Die Sensitiv-Einstellung empfiehlt sich für Personen mit empfindlichen Zähnen, Parodontitis, bei Implantaten, Rekonstruktionen und freiliegenden Zahnhälsen. Sie ist ideal geeignet zur regelmäßigen Intensivpflege der Zähne mit Fluoridgelen.

Intensiv-Modus

Bei gewähltem Intensiv-Modus leuchten die zwei obersten LED-Lampen.

Die Druckwellen der Schalltechnologie erzeugen pulsierende Flüssigkeitsströmungen, welche in enge Zahnzwischenräume vordringen und schädliche Ablagerungen selbst in verdeckten Nischen entfernen. Diese Einstellung sorgt für eine optimale Reinigung und Gesunderhaltung Ihrer Zähne. Sie wird als Grundeinstellung bei gesunden Zähnen empfohlen.

Bei gewähltem Whitening-Modus leuchten alle drei LED-Lampen.

Verstärkte Wischbewegungen auf den Zahnoberflächen entfalten im Whitening-Modus eine erhöhte Reinigungswirkung. Die Zähne werden von Verfärbungen befreit. Die Whitening-Einstellung empfiehlt sich besonders in Fällen von Verfärbungen durch Nikotin, Wein, Tee oder Kaffee, sowie für eine gelegentliche Zusatzreinigung der Zähne.

Kieferquadrant-Timer

Der Kieferquadrant-Timer ist ein Intervalltimer, der den Putzvorgang kurz unterbricht und den empfohlenen Wechsel der Kieferquadranten signalisiert. So kann jeder der vier Abschnitte des Mundes gründlich und gleichmäßig geputzt werden.

Zahnputz-Timer

Laut zahnärztlichen Empfehlungen sind 2 Minuten als Mindestputzdauer zu betrachten. Nach der empfohlenen Putzdauer, welche ja nach Reinigungsmodus variiert, schaltet sich die getaplus-unicus Schallzahnbürste ab.

Reiseverriegelung

Die getaplus-unicus Schallzahnbürste- Reiseverriegelung sperrt die Tasten vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme auf Reisen.

Sperrung des Gerätes: Um das Gerät zu sperren, den Knopf Funktionsauswahl während ca. 4 Sekunden gedrückt halten bis die Verriegelungsanzeige kurz aufblinkt. Das Gerät ist nun geschützt vor versehentlichem Einschalten.

Entsperrung des Gerätes: Um die Tasten zu entsperren wiederum den Knopf Funktionsauswahl während ca. 4 Sekunden drücken. Die Verriegelungsanzeige zeigt durch Blinken an, dass der Verriegelungsschutz aufgehoben ist. Alternativ kann die Zahnbürste auch auf die Ladestation gestellt werden. Dadurch wird der Verriegelungsschutz automatisch aufgehoben.

Getaplus-unicus Modelle

getaplus-unicus gum care

Lieferumfang:

- 1 getaplus-unicus Handstück
- 2 Bürstenköpfe Dual Clean
- 1 Bürstenkopf Opal
- 1 Ladestation (100-240 V)
- 1 Reisetui
- 1 Reiseschutzkappe

getaplus-unicus gum care twin

Lieferumfang:

- 2 getaplus-unicus Handstücke
- 2 Bürstenköpfe Dual Clean
- 2 Bürstenköpfe Opal
- 1 Ladestation (100-240 V)
- 1 Reisetui
- 2 Reiseschutzkappen

getaplus-unicus opal

Lieferumfang:

- 1 getaplus-unicus Handstück

1 Ladestation (100-240 V)
1 Reisetui
1 Reiseschutzkappe

getaplust-unicus Schallzahnbürste Bürstenköpfe

getaplust-unicus Dual Clean soft 3'er Pack UVP 19,95 €

GETA-SG 3GC / EAN 0788454721329

Mikrofeine KONEX Borsten reinigen gründlich und schonend Zähne und Zahnfleisch bis in die kleinste Nische. Ideal auch für sensible Zähne und bei Zahnfleischproblemen.

getaplust-unicus Opal Clean 3'er Pack UVP 19,95 €

GETA-SG 3O / EAN 0788454721336

Die patentierte Whiteningbürste mit Gummieinschlüssen radiert selbst hartnäckige Zahnverfärbungen weg ohne zu scheuern.

getaplust-unicus Single Clean soft 3'er Pack UVP 19,95 €

GETA-SG 3S / EAN 0788454721343

Rundum saubere Zähne, Spangenbrackets und Implantate dank mikrofeiner KONEX Borsten. Ideal auch bei Zahnfehlstellungen.

Reinigung des Gerätes

Spülen Sie Bürstenkopf und Bürste nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab. Nehmen Sie einmal pro Woche den Bürstenkopf vom Handstück und reinigen Sie die Verbindung zwischen Bürstenkopf und Handstück. Ziehen Sie vor dem Reinigen der Geräteteile stets den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie das Ladegerät mit einem feuchten Tuch ab und schließen Sie es erst in völlig trockenem Zustand wieder an das Stromnetz an. Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Netzstecker herausziehen, das Gerät reinigen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Garantie

getaplust-dental gewährt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt für jedes Land, in dem dieses Gerät von getaplust-dental oder einem beauftragten Händler vertrieben wird.

Folgendes wird von der Garantie nicht gedeckt:

Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung, normale Abnutzung oder Gebrauch, vor allem der Aufsteckbürsten, sowie Mängel, die eine unerhebliche Auswirkung auf den Wert oder den Betrieb des Gerätes haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von unbefugten Personen vorgenommen werden oder das Gehäuse geöffnet wird.

Um den Anspruch an der Garantie geltend zu machen, senden Sie das vollständige Gerät mit Kaufnachweis zu dem offiziellen getaplust dental Vertreter Ihres Landes. Sollte diese nicht bekannt sein, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.getaplust-dental.de, senden Sie eine E-Mail an service@getaplust-dental.de oder rufen Sie uns direkt an ++49 06486 902993.

Technische Daten

Netzspannung: 100 – 240 V AC, 50 Hz, 2.5 W, Class II, IPX7

Akku: Wiederaufladbarer Li-ion-Akku

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 12 Stunden

Konformität

Ladedauer bei Erstladung: 12 Stunden

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien der EU (EMV/RoHS) und Niederspannung.

Es ist GS zertifiziert durch Intertek.



Entsorgung

Dieses Gerät enthält einen Li-ion-Akku. Am Ende seiner Lebensdauer muss das Gerät der Wiederverwendung zugeführt oder umweltgerecht entsorgt werden. Die Batterie muss vor der Vernichtung des Gerätes entfernt oder korrekt entsorgt werden. Zuvor ist das Gerät von der Netzspannung zu trennen. Spezielle Container zur Entsorgung sind in Geschäften oder öffentlichen Sammelstellen bereitgestellt. Bei der Entsorgung des Gerätes die Elektroden der Batterie mit Klebeband fixieren. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle, recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie die Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Altgerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.